

DENFLY®

AUTOCLAVE CLASSE B STERILIZZATORE A VAPORE

STUDIO ODONTOIATRICO

SANATECH
DENTISTRY & TECHNOLOGY

SANATECH 1

Autoclave classe B

Sterilizzatore a vapore

L'autoclave a vapore sottovuoto della serie T&S ha combinato tecnologia avanzata con un attento lavoro di ricerca e sviluppo per raggiungere avanzamenti nel campo della sterilizzazione.

Caratteristiche che differenziano i nostri macchinari sono:

- **Design moderno**
- **Facilità di funzionamento**
- **Prezzo competitivo**
- **Ottime prestazioni e qualità**

Il nostro team di professionisti lavora per la progettazione, lo sviluppo ed il controllo della qualità.

Tutti i prodotti si avvalgono di certificato ISO 9001, 13485 e del certificato CE dal TUV tedesco per il mercato globale.

Tutte le autoclavi presentano :

- 3 o 5 cassette che facilitano il processo di sterilizzazione
- Chiusura sicura ed automatica della porta
- Sistema multi-lingua
- Connessione USB



Parametri tecnici

17B

23B


Modello	DENFLY 17B	DENFLY 23B
Codice articolo	SNDFSS17B	SNDFSS23B
Alimentazione potenza	230V± 10% 50/60Hz	230V± 10% 50/60Hz
Potenza	1300W	1800W
Ingombro principale	48*43*56cm	48*43*69cm
Dimensioni camera	Φ25*35cm	Φ25*49cm
Peso netto	40	44
Peso lordo	48	53
Numero di aspirazioni	3	3
Vassoi	3	3
Temperatura di sterilizzazione	121°C/134°C	121°C/134°C
Tempo di sterilizzazione	varia dal programma	varia dal programma
Processo di asciugatura	sottovuoto	sottovuoto
Materiale	acciaio inox SUS 304	acciaio inox SUS 304
Tanica dell'acqua	interna	interna

Test per la valutazione dei parametri

Sottovuoto

Helix/bdtest

Temperatura	-	134
Pressione	-0.8	2.1
Tempo di sterilizzazione	-	18
Volte pre-sottovuoto	-	3
Asciugatura sottovuoto	-	10
Tempo totale	8	58

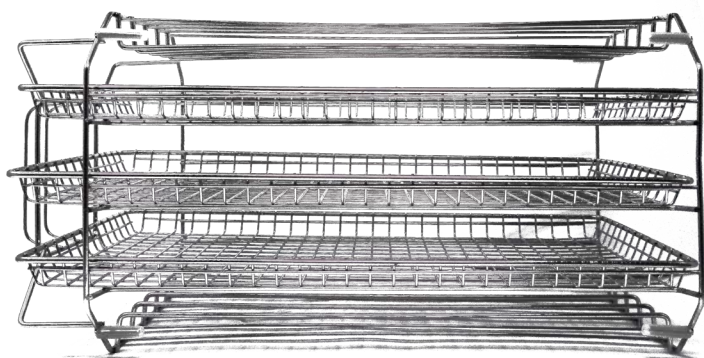

Denfly 23B - cassette interne

*Dimensioni camera: Φ25*49cm*

Nr. di cassette: 3

Diversi programmi per tutte le esigenze

Programmi	Temperatura	Pressione	Tempo	Asciugatura sottovuoto	Tempo tot.	Adatto per strumenti
Porous	134°C	2.1	4	sì	35-48	rivestiti/porosi
Hollow	134°C	2.1	4	sì	30-42	non-rivestiti/cavi
Wrapped	134°C	2.1	4	sì	25-35	rivestiti cavi/porosi
Solid	134°C	2.1	4	sì	25-35	non-rivestiti/solidi
Porous	121°C	1.1	20	sì	45-55	rivestiti cavi/porosi
Hollow	121°C	1.1	20	sì	40-50	non-rivestiti/cavi
Wrapped	121°C	1.1	20	sì	35-48	non-rivestiti/solidi
Prion	134°C	2.1	18	sì	50-60	non-rivestiti/cavi

Ulteriori vantaggi che offrono le autoclavi Denfy sono:

- **Display LCD**
- **Riempimento automatico della tanica d'acqua**
- **Drenaggio automatico dell'acqua e eliminazione dell'aria in eccesso**
- **Rileva gli errori istantaneamente**
- **Sterilizza in modo ottimale prodotti solidi**
- **Maggior sicurezza**
- **Controllo della temperatura interna**
- **Controllo della pressione**
- **Chiusura automatica della porta**
- **Integratore dei livelli d'acqua**



Interno autoclave



Retro autoclave



www.sanatech.eu
ordini.sanatech@gmail.com
+39 377 84 53 716